



脳腫瘍に対する二段階希釈造影 + 3D Overlay機能の活用



Siemens Artis icono D-Spin
4s DSA DCT Head Care 248 frame/200°
オムニパーク300 4倍希釈 → 原液の二段階注入

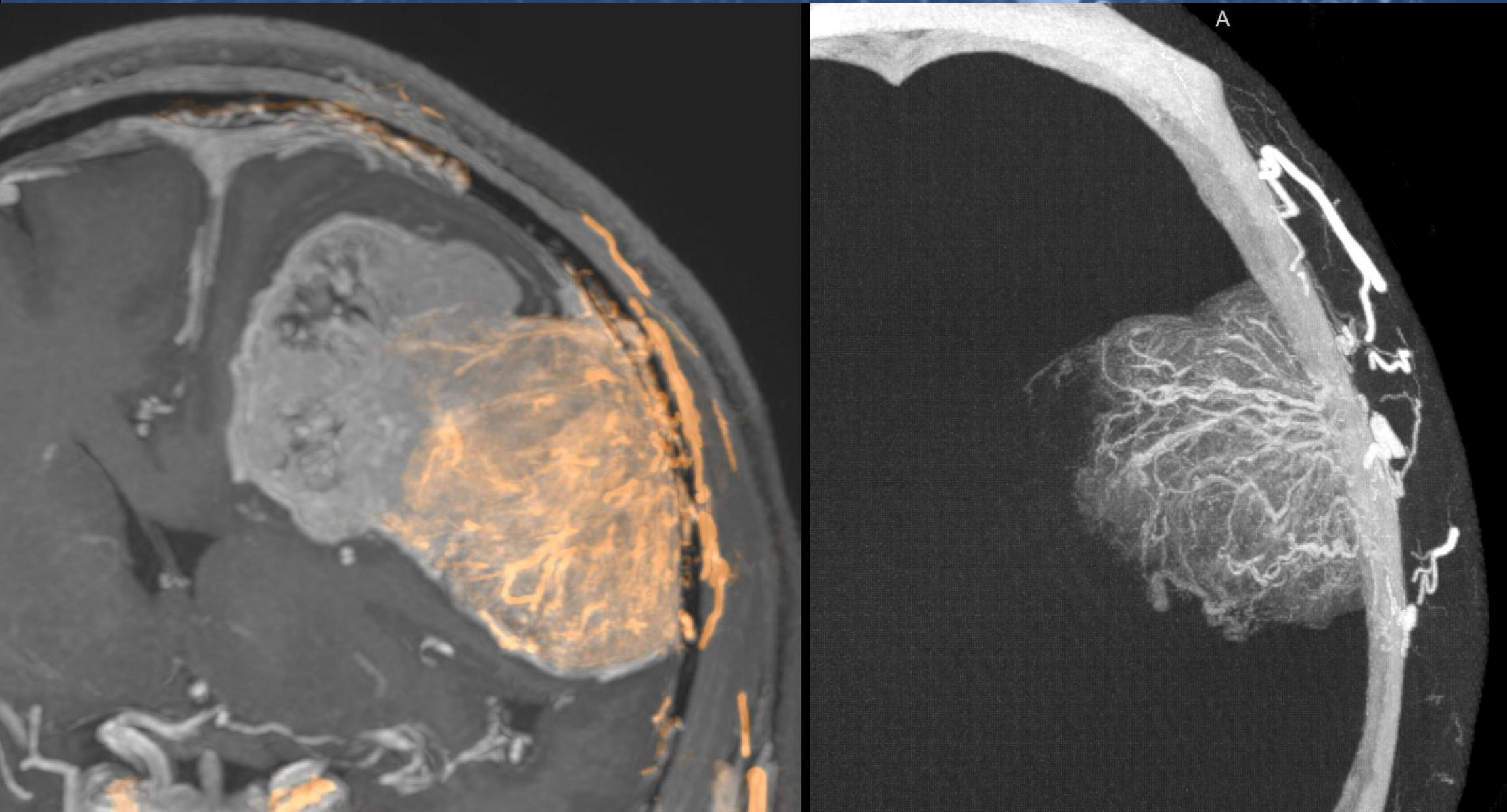


✓ 観察目的に応じてウィンドウを調整！

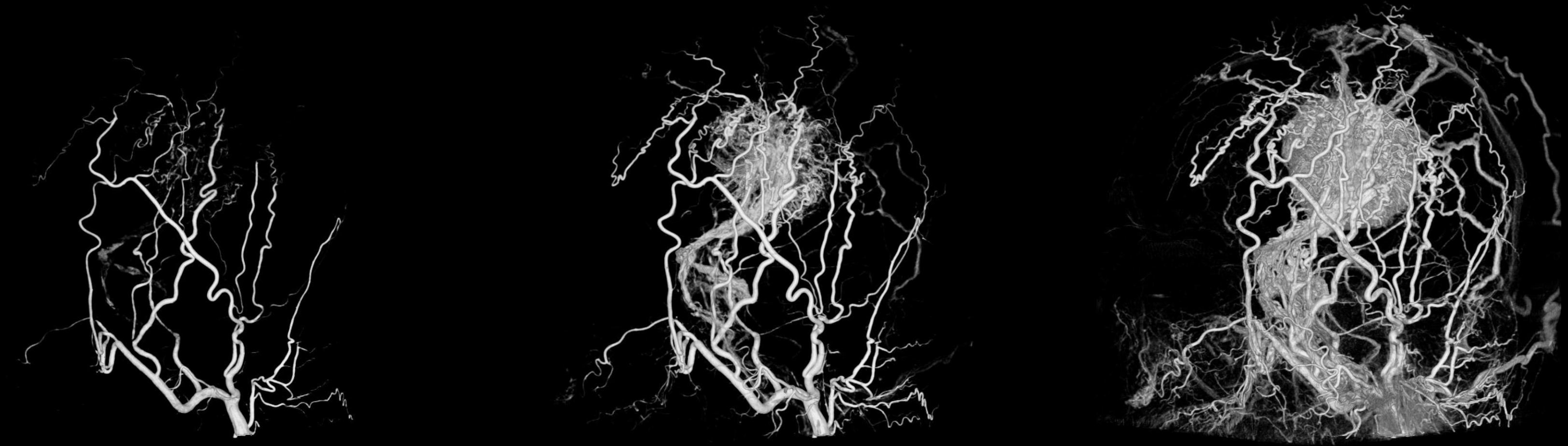

Feederはもちろん，腫瘍内の血管，静脈の情報まで目的に応じて表示可能．

✓ 空回しとMRIのfusionで透視に腫瘍をかさねて表示！

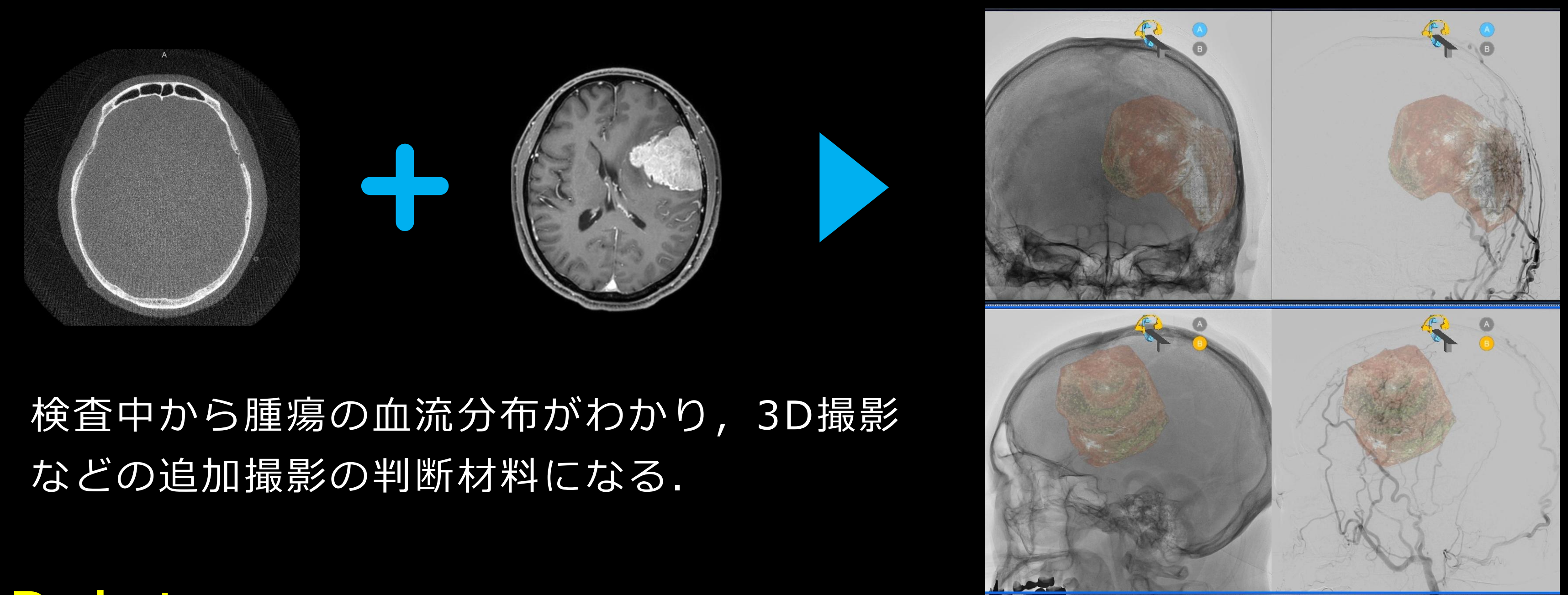

検査中から腫瘍の血流分布がわかり，3D撮影などの追加撮影の判断材料になる．

Point

希釈造影剤と投影データ数の多い撮影モードの選択により，腫瘍内のストリークアーチファクトが抑制される．これにより，Slab MIPやMRIとのfusion imageで腫瘍内血管のより詳細な観察が可能となる．